

# PraxiFill™

Remplisseuse de seringues automatique


“ Rapide, précis et répétable.  
Le remplissage de seringues  
rendu facile! ”

PraxiFill™ est une remplisseuse de seringue semi-automatique destinée à augmenter la productivité du processus de remplissage de la seringue en éliminant la tâche manuelle fastidieuse d'aspirer la solution dans la seringue et de mettre un bouchon sur la seringue remplie.

PraxiFill™ est conçu pour être utilisé avec les seringues stériles pré-bouchonnées de MedXL pour une efficacité et une productivité accrues.

Les formats de seringues disponibles sont 3cc, 5cc, 10cc, 20cc et 50cc.

La vitesse de remplissage peut atteindre jusqu'à 8 seringues/minute selon le format de la seringue.

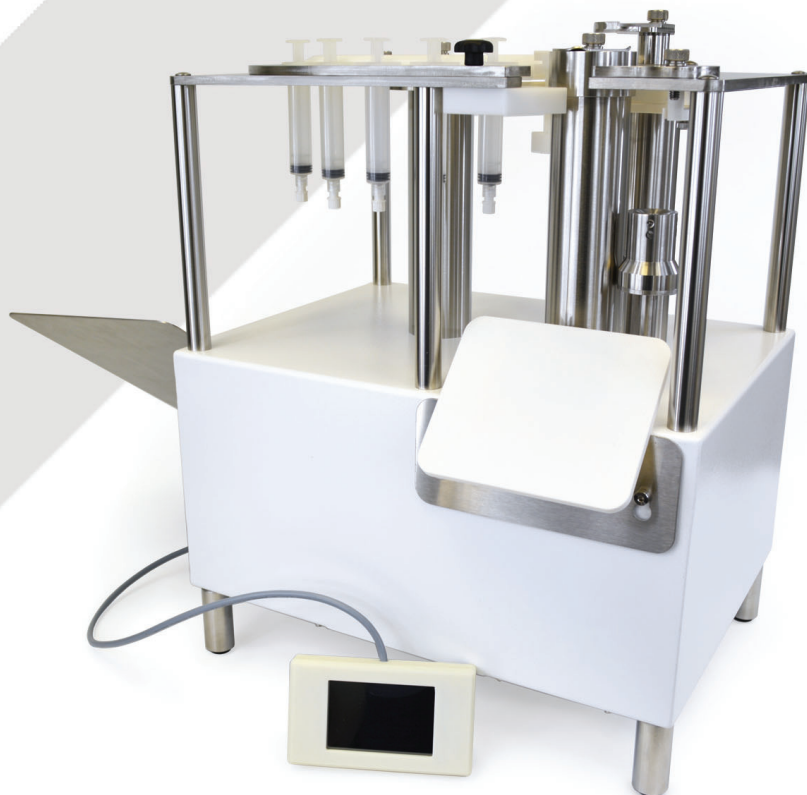

**Augmente la productivité**

**Économie de temps et d'argent**

**Réduit les blessures causées par des mouvements répétitifs**

### Caractéristiques & avantages


- ✓ Remplissage et bouchonnage rapide, précis et répétable.
- ✓ Pas besoin de calibration, mise à zéro automatique sur toutes les fonctions.
- ✓ Petite empreinte environnementale (Compacte.).
- ✓ Peut remplir des seringues de 3cc, 5cc, 10cc, 20cc et 50cc.
- ✓ Changement simple et rapide entre différentes tailles de seringues.
- ✓ Le niveau de remplissage minimal est de 10% de la capacité de la seringue.
- ✓ Précision de remplissage et répétabilité de +/- 1%.
- ✓ Pas de perte de liquide durant le remplissage.
- ✓ Bouchons conçus pour cycle de congélation et de décongélation.


Photo à titre indicatif seulement. Le produit peut être différent de l'image.

FS-VM-1304F ©2025



Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre représentant.

 MedXL Inc.  
Pointe-Claire (Qc) Canada H9R 1A3

 [medxl.com](http://medxl.com)  
 +1.514.695.7474

**MEDXL**  
Une compagnie de **AMSINO**